



Guide d'enseignement

Héмато-oncologie

SYSTÈME INFUSOR^{MD} pour la perfusion ambulatoire de chimiothérapie

Définition :

Le système Infusor^{MD} est un système simple à utiliser. Il est fait de plastique très rigide. Ce plastique protège le ballon que vous voyez à l'intérieur (page 2). Votre chimiothérapie est à l'intérieur du ballon. Ce ballon se dégonfle de façon constante. À mesure qu'il se dégonfle, il « poussera » doucement la chimiothérapie dans la tubulure puis dans votre cathéter. La petite partie blanche sur la tubulure s'appelle un restricteur de volume ou « raccord luer verrouillant ». Il contrôle la vitesse à laquelle s'administre votre chimiothérapie. Il doit être fixé avec un ruban adhésif sur votre peau en tout temps.




Votre chimiothérapie doit s'écouler pendant _____ heures.

Comment surveiller votre Infusor^{MD}?

- Le système pousse la chimiothérapie très lentement. Pendant les premières heures, vous ne constaterez probablement aucun changement dans la taille du ballon. Quand il rapetissera, il sera plus facile de constater les changements.
- Utilisez l'indicateur de progression sur le boîtier du système de perfusion pour surveiller la progression de la perfusion au fil du temps.
- La perfusion est terminée lorsque le ballonnet est entièrement dégonflé et que les huit (8) protubérances (quatre (4) de chaque côté du ballonnet) à l'intérieur du système de perfusion sont bien visibles.

Votre infirmière vous montrera comment vérifier (au moins 1 fois par 8 heures) que le système fonctionne adéquatement. Les 5 photos vous montrent à quoi le ballon devrait ressembler du début (photo de gauche) à la fin (photo de droite) d'une perfusion de 2 jours.

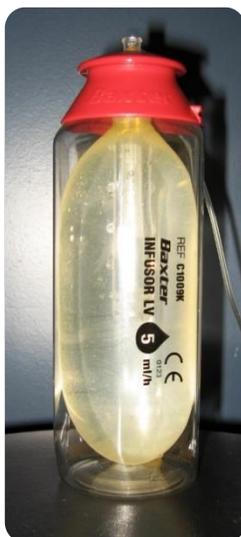

©CHUM



©CHUM



©CHUM



©CHUM



©CHUM

Jour 0 : le ballon aura cette forme à l'installation
Jour 0 : Le ballon aura cette forme 12 heures après l'installation
Jour 1 : Le ballon aura cette forme 24 heures après l'installation
Jour 1 : Le ballon aura cette forme 36 heures après l'installation
Jour 2 : Le ballon aura cette forme à la fin de la perfusion, lorsqu'il sera vide (46 heures après l'installation)

Contactez les numéros d'urgence si les situations suivantes se présentent :

- Le ballon s'est vidé plus de 5 heures avant sa fin prévue.
- Le ballon n'a pas rapetissé dans les 8 dernières heures.
- L'Infusor^{MD}, la pochette de transport, la tubulure ou le pansement sont humides ou mouillés.
- Le ruban du "raccord luer verrouillant" s'est décollé de la peau.
- L'Infusor^{MD} coule ou se brise.

Si le système coule ou se brise?

- Mettez le système dans un sac Ziploc pour prévenir la fuite de tout liquide.
- Si de la chimiothérapie s'est écoulee sur votre peau, lavez bien la zone touchée avec de l'eau tiède et du savon.
- Communiquez avec le pharmacien à l'aide des numéros d'urgence.

Quelle est la meilleure façon de transporter mon Infusor^{MD} pendant la journée?

Vous pouvez le transporter à l'intérieur de sa pochette de transport, à la taille ou en bandoulière. Assurez-vous de ne pas l'exposer au soleil ni à de hautes températures.

Puis-je prendre mon bain avec l'Infusor^{MD}?

Oui, vous pouvez vous laver!

Vous pouvez mettre un foulard ou une cravate autour de votre cou et y épingler votre pochette de transport de manière à vous assurer que le système continue à perfuser normalement et n'entre pas en contact avec l'eau.

Où dois-je mettre mon Infusor^{MD} pendant que je dors?

Gardez l'Infusor^{MD} au même niveau que la pièce de la tubulure qui connecte à votre cathéter. N'installez pas le système très haut (ex. sur la tête de votre lit) ni très bas (ex. au sol). La majorité des gens l'installe sous leur oreiller.

Puis-je faire de l'exercice avec l'Infusor^{MD}?

Il est possible de faire de l'exercice avec le système de perfusion à condition que la température demeure près de la température ambiante et qu'il ne soit pas exposé à l'eau.

Reste-t-il de la chimiothérapie dans l'Infusor^{MD} lorsque la perfusion est complétée?

Oui. Il restera moins d'une demi-cuillère à thé de chimiothérapie dans le système quand le traitement sera terminé.

Puis-je prendre l'avion avec un Infusor^{MD}?

Oui. Comme toute autre personne.

*** N'oubliez pas de rapporter votre pochette de transport à chaque traitement. ***

Vous avez des questions?

HOPITAL DE L'ENFANT-JÉSUS / CIC**PHARMACIENS :**

Lundi au vendredi entre 8 h et 16 h
418 525-4444, poste 63564

Lundi au vendredi entre 16 h et 22 h
418 649-5640 (option 1 distribution)

Lundi au vendredi entre 22 h et 8 h
418 525-4444 et demander à la téléphoniste
qu'elle signale le pharmacien de garde pour
les pompes Ativad

Samedi, dimanche et fériés
entre 9 h 30 et 21 h
418 649-5640 (option 1 distribution)

Samedi, dimanche et fériés
entre 21 h et 9 h 30
418 525-4444 et demander à la téléphoniste
qu'elle signale le pharmacien de garde pour
les pompes Ativad.

